


seca 878

Pèse-personne plat pour
une utilisation mobile avec
boutons-poussoirs et
double affichage 

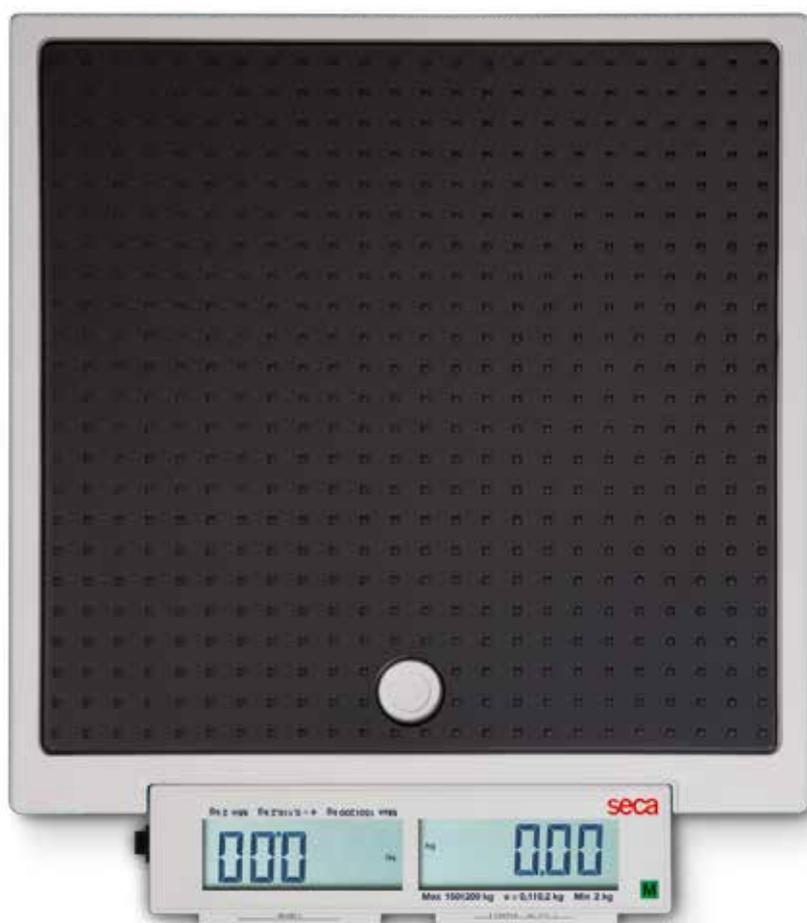

- Fonction « TARE-mère » pour faciliter la pesée d'enfants en bas âge.
- Larges pieds réglables pour une grande stabilité.
- Balance légère alimentée par piles pour une meilleure mobilité.
- Deux écrans d'affichage pour une double lecture du poids patient/praticien.
- Deux boutons pour une utilisation facile de la balance par une simple pression du pied.

seca 878 :

La balance qui pense à vous.

Le modèle seca 878 répond parfaitement à ce que l'on attend d'une balance mobile, et même plus: sa construction est très robuste, elle donne des valeurs précises quelque soit le degré hydrométrique de l'air, ses piles ont une longue durée d'utilisation et elle est facile à manipuler.



Grande stabilité.

Bien qu'elle ne pèse que 4.1 kg, la balance seca 878 est très résistante. Ceci est dû d'une part au cadre d'acier et d'autre part à la cannellure de qualité supérieure des parties en matière synthétique. De plus, elle supporte les chocs grâce à l'utilisation de matière synthétique ABS-2-composants et de plexiglas®. De ce fait, non seulement les enfants en bas âge peuvent être pesés, mais aussi les adultes pouvant atteindre un poids de 200 kg. Des pieds réglables particulièrement larges garantissent la stabilité quelle que soit la surface.

Manipulation facile.

Il n'est plus nécessaire de se baisser continuellement, par exemple lors d'examen en série, parce qu'on peut allumer et éteindre la balance seca 878 avec une pression du pied sur deux boutons situés à l'avant. De plus le travail est simplifié par la fonction « TARE-mère » qui permet la pesée de l'enfant dans les bras de sa mère. Le transport est également facile, car la balance dispose d'une poignée intégrée, ne pèse que 4.1 kg et peut se loger dans une mallette de transport en nylon ultra-léger.

Détails intelligents.

Ce sont les deux affichages qui sont à mettre en relief. Ils permettent au patient et au personnel, depuis deux endroits différents, la lecture simultanée de la valeur mesurée. Grâce à un interrupteur de bascule et à une fonction d'interruption manuelle qui empêchent une mise en circuit non intentionnelle pendant le transport, le fonctionnement de la balance est toujours assuré, même dans des conditions difficiles.

Le médecin et le patient peuvent lire le résultat simultanément grâce au double affichage.



Les larges pieds réglables garantissent la stabilité quelle que soit la surface



Les deux boutons sur l'avant permettent l'utilisation facile avec une pression du pied.



La construction plate et la surface antidérapante garantissent une posture stable et un accès confortable.

seca 878

Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 321 x 61 x 362 mm
- Dimensions/plateforme (LxHxP) : 288 x 60 x 280 mm
- Poids : 4.1 kg
- Alimentation électrique : piles, adaptateur secteur seca 447 (en option)
- Fonctions : mother/child-fonction, HOLD, automatic switch-off
- En option : le stadiomètre seca 217 combiné à l'adaptateur seca 437, sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec le stadiomètre et l'adaptateur) et seca 415